

Pressure Stimulite® sortiment

Lejring | Aflastning | Tryksårsforebyggelse



Zibo Athene

...gør en forskel



Zibo Athene A/S

Mere end blot et samarbejde ...

Hos Zibo Athene står vi altid klar til at hjælpe dig. Herunder finder du kontaktinformation på de konsulenter, der er tilknyttet Pressure. Har du spørgsmål, brug for hjælp eller produktrelateret undervisning så tag endelig kontakt.

Seminarer og skræddersyede projektføløb

Vi tilbyder desuden afholdelse af seminarer eller skræddersyede projektføløb. Alt sammen efter dine ønsker. Lad os tage en snak om det, så vi finder den rette løsning til dig. Ønsker du at afprøve et givent produkt, stiller vi det gerne til rådighed ifm. afprøvning.

Vi ser frem til et givende samarbejde ... og sætter en ære i at gøre en forskel for dig.

Kontaktinformation

Kundeservice

Dorthe og Louise er klar til at hjælpe på:

Tlf.: 76 900 407

E-mail: post@ziboathene.dk

Key Account Manager

Karina M. Hansen

Region Midt og Nord

(+45) 20 92 20 92
kh@ziboathene.dk

Key Account Manager

Martin Olesen

Region Syd og Sjælland

(+45) 40 78 04 14
mo@ziboathene.dk

Key Account Manager

Michael Andresen

Region Hovedstaden

(+45) 40 44 84 80
mia@ziboathene.dk

Stimulite® sortiment

Forebyggelse, lindring og behandling af tryksår	5
---	---

Madras

Stimulite® 3-Zone madras	6
--------------------------------	---

Siddepuder

Stimulite® Contour pude	7
Stimulite® Contour Sensitive pude	8
Stimulite® Contour Mini pude	9
Stimulite® Corbee pude	10
Stimulite® Classic pude	11
Stimulite® Classic Sensitive pude	12
Stimulite® Classic Bariatrisk pude	13
Stimulite® Slimline pude	14
Stimulite® Slimline Sensitive pude	15
Stimulite® Silver pude	16
Stimulite® Sport pude	17

Betræk

Stimulite® On Top betræk	18
--------------------------------	----

Positioneringskile


Stimulite® positioneringskile	19
-------------------------------------	----

Rygpude

Stimulite® ryg	20
----------------------	----

Kvadrater

Stimulite® kvadrater	21
----------------------------	----

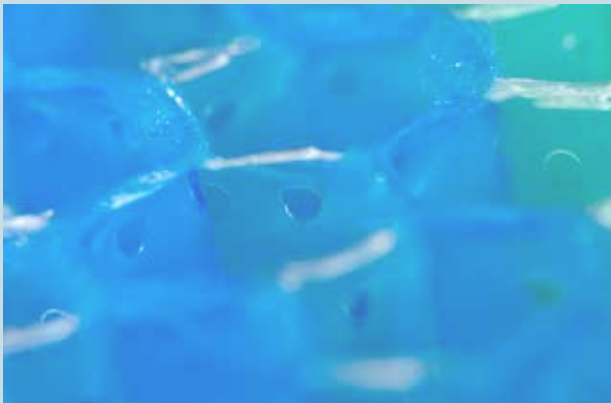

Pressure

Forebyggelse, lindring og behandling af tryksår

Tryksår kaldes på latin decubitus, og på dansk siddesår eller liggesår. Nogle områder på kroppen er mere udsatte for decubitus end andre, nemlig de områder, hvor der er knoglefremspring tæt på huden f.eks. hæle, haleben og skulderblade.

Et tryksår opstår, hvis huden igennem længere tid er udsat for tryk, shear eller friktion i hudlagene. F.eks. hvis man er sengeliggende i længere tid eller på grund af sygdom eller alderdom er blevet mere immobil. I disse tilfælde er der risiko for, at der sker en afklemning af hud og væv mellem underlag og knogle. Forskydningen i hudlagene kan også give tryksår og kan forekomme, f.eks. når patienten vendes, eller hvis patienten har en dårlig siddestilling. Under alle omstændigheder opstår tryksår, hvis cellerne ikke får transporteret nok ilt til sig og dermed dør.

Tryksår er en hyppig lidelse blandt hospitalsindlagte, plejehjemsbeboere og personer der er immobile i kortere eller længere perioder (f.eks. kørestolsbrugere, sengeliggende m.fl.).

Tryksår er et fokusområde i Danmark på både hospitaler og i kommuner, fordi det er en tilstand, som er meget ubehagelig og smertefuld for patienten og meget dyrt og plejekrævende at behandle. I sundhedssektoren arbejder det professionelle sundhedspersonale hårdt på at forebygge tryksår, og Zibo Athene A/S bistår med et bredt produktsortiment, rådgivning, vejledning og uddannelse i brugen af de forskellige hjælpemidler.



Tekniske data

6 Kg | 85x200x7 cm
HMI nr.: 84708
Varenr.: GSR 00067



Stimulite® 3-Zone madras

Optimal trykaflastningsmadras

Stimulite® 3-Zone madrassen anvendes forebyggende og behandlende ved sårkategori 1 til om med 3.

Unik bikubestruktur

Madrassen er lavet i termoplastisk polyuretan, der består af perforerede celler i bikubestruktur, som gør, at luften kan cirkulere og dermed undgå, at huden bliver varm og fugtig. Den former sig efter kroppen, så den giver optimal stabilitet, trykfordeling samt trykaflastning.

3-Zone systemet

Stimulite® 3-Zone madrassen er opbygget så hovedenden er 9% blødere, og fodenden er 32% blødere end den bærende midterste del. Dette gør, at den er meget skånsom mod ømme og trykkede hæle samt skuldre. Madrassen kræver ikke nogen særlig instruktion, og vægten på ca. 6 kg gør den samtidig let at transportere.

Stimulite® – idéen bag

Det er de bærende konstruktioner inden for rumfarten, der ligger til grund for den avancerede geometri i Stimulite® bikubemadrassen. Den er opbygget af sekskanter (hexagoner), som former et komplekst mønster af skiftevis tyk- og tyndvæggede celler. Hver celle har 8 fæstningspunkter og består af 4 enkeltvægge og 2 dobbeltvægge.

Trykaflastning og stabilitet

Det unikke mønster af bærende (anisotropiske) enkelte og dobbelte vægge, som har forskellig grad af vægtbæring og stabilitet i længde, bredde og tykkelse, kan både støtte, aflaste og fordele trykket over et stort område.

Varme og fugtregulering

Stimulite® 3-Zone madrassen er perforeret både vandret og lodret og tillader luften at cirkulere, så vævstemperaturen ikke øges. Fugten vil fordampe og huden holdes tør.

Glidetrykket (shear) reduceres

Stimulite® madrassen minimerer glidetrykket uden at reducere stabiliteten. Bikubecellerne udligner sig axialt mod kroppen, giver efter ved bevægelse og reducerer derved glidekræfterne mod huden. For stor stivhed i madrassen får glidetrykket til at stige, medens et for blødt materiale påvirker stabiliteten.

Vaskeanvisning

Madrassen tåler maskinvask ved max 80 grader eller vaskeautomat ved max 85 grader i 10 min. Tørretumbling ved kold luft. Inkontinensbetræk medfølger. Betrækket tåler vask ved max 95 grader og kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 225 kg

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

36x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51341 Varenr.: CD1416	46x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31339 Varenr.: CD1820
41x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31335 Varenr.: CD1616	51x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 38540 Varenr.: CD2018
41x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31336 Varenr.: CD1618	51x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31340 Varenr.: CD2020
41x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41955 Varenr.: CD1620	56x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 64506 Varenr.: CD2218
46x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31337 Varenr.: CD1816	56x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 50472 Varenr.: CD2220
46x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31338 Varenr.: CD1818	56x56x5x9x7,6 cm HMI nr.: 100970 Varenr.: CD2222



Stimulite® Contour pude

Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved max 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,9 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

36x36x5x9x7,6 cm HMI nr.: 87921 Varenr.: CDSX1414	46x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 39915 Varenr.: CDSX1818
36x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51306 Varenr.: CDSX1416	46x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41937 Varenr.: CDSX1820
36x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51342 Varenr.: CDSX1418	51x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 100992 Varenr.: CDSX2016
41x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 39914 Varenr.: CDSX1616	51x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41938 Varenr.: CDSX2018
41x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 40628 Varenr.: CDSX1618	51x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 49935 Varenr.: CDSX2020
41x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 48969 Varenr.: CDSX1620	56x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51307 Varenr.: CDSX2218
46x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 49895 Varenr.: CDSX1816	56x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51308 Varenr.: CDSX2220



Stimulite® Contour Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt top lag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.


Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,6 kg
Garanti	2 år

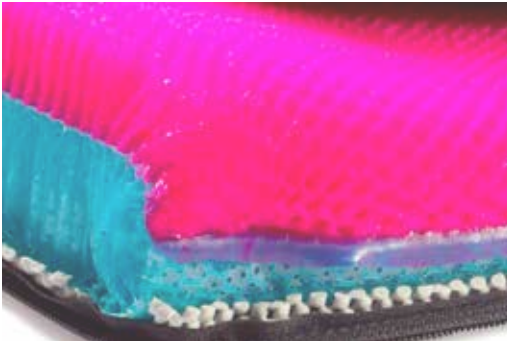

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

26x26x6x5 cm

HMI nr.: 35763

Varenr.: PDCD1010

36x36x6x6 cm

HMI nr.: 35765

Varenr.: PDCD1414

31x31x6x5 cm

HMI nr.: 35764

Varenr.: PDCD1212



Stimulite® Contour Mini pude

Anatomisk konturformet siddepude til børn

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og lette voksne under 45 kg.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Puden er med til at give barnet tryghed i siddestillingen.

Anatomisk korrekt

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt Max 50 kg

Vægt 1,6 kg

Garanti 2 år



Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

26x26x5x5 cm
HMI nr.: 40908
Varenr.: PD1010

36x36x5x5 cm
HMI nr.: 40910
Varenr.: PD1414

31x31x5x5 cm
HMI nr.: 40909
Varenr.: PD1212

Stimulite® Corbee pude

Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger

Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger. Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og voksne under 75 kg.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed.

Perfekt siddestilling

Puden yder brugeren trykthed i siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer samtidig at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 75 kg
Vægt	1,6 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm
HMI nr.: 101011
Varenr.: CL1416

51x51x7x7 cm
HMI nr.: 31358
Varenr.: CL2020

41x41x7x7 cm
HMI nr.: 31353
Varenr.: CL1616

51x56x7x7 cm
HMI nr.: 100963
Varenr.: CL2022

41x46x7x7 cm
HMI nr.: 31354
Varenr.: CL1618

56x46x7x7 cm
HMI nr.: 100962
Varenr.: CL2218

41x51x7x7 cm
HMI nr.: 51303
Varenr.: CL1620

56x51x7x7 cm
HMI nr.: 39786
Varenr.: CL2220

46x41x7x7 cm
HMI nr.: 31355
Varenr.: CL1816

56x56x7x7 cm
HMI nr.: 51634
Varenr.: CL2222

46x46x7x7 cm
HMI nr.: 31356
Varenr.: CL1818

61x51x7x7 cm
HMI nr.: 100484
Varenr.: CL2420

46x51x7x7 cm
HMI nr.: 31357
Varenr.: CL1820

61x56x7x7 cm
HMI nr.: 100966
Varenr.: CL2422

51x46x7x7 cm
HMI nr.: 51304
Varenr.: CL2018



Stimulite® Classic pude

Flad siddepude med støttende sider

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat balance, men selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af Termoplastisk Polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,5 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm

HMI nr.: 51305
Varenr.: CLSX1416

46x51x7x7 cm

HMI nr.: 43547
Varenr.: CLSX1820

41x41x7x7 cm

HMI nr.: 39912
Varenr.: CLSX1616

51x41x7x7 cm

HMI nr.: 51339
Varenr.: CLSX2016

41x46x7x7 cm

HMI nr.: 40627
Varenr.: CLSX1618

51x46x7x7 cm

HMI nr.: 51252
Varenr.: CLSX2018

41x51x7x7 cm

HMI nr.: 64703
Varenr.: CLSX1620

51x51x7x7 cm

HMI nr.: 51253
Varenr.: CLSX2020

46x41x7x7 cm

HMI nr.: 49286
Varenr.: CLSX1816

56x46x7x7 cm

HMI nr.: 100962
Varenr.: CLSX2218

46x46x7x7 cm

HMI nr.: 39913
Varenr.: CLSX1818

56x48x7x7 cm

HMI nr.: 100963
Varenr.: CLSX2220



Stimulite® Classic Sensitive pude

Flad siddepude med støttende sider og ekstra blødt toplag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere med ekstra følsom hud, som har nedsat balance, men som selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,6 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

51x51x7x7 cm
HMI nr.: 61207
Varenr.: CLB2020

61x61x7x7 cm
HMI nr.: 65041
Varenr.: CLB2424

51x56x7x7 cm
HMI nr.: 50007
Varenr.: CLB2022

64x70x7x7 cm
HMI nr.: 100995
Varenr.: CLB2528

51x61x7x7 cm
HMI nr.: 77005
Varenr.: CLB2024

66x50x7x7 cm
HMI nr.: 88269
Varenr.: CLB2620

56x46x7x7 cm
HMI nr.: 77003
Varenr.: CLB2218

71x51x7x7 cm
HMI nr.: 85123
Varenr.: CLB2820

56x51x7x7 cm
HMI nr.: 77002
Varenr.: CLB2220

70x61x7x7 cm
HMI nr.: 100999
Varenr.: CLB2824

56x53x7x7 cm
HMI nr.: 100996
Varenr.: CLB2221

76x56x7x7 cm
HMI nr.: 69682
Varenr.: CLB3022

56x56x7x7 cm
HMI nr.: 77004
Varenr.: CLB2222

81x56x7x7 cm
HMI nr.: 101000
Varenr.: CLB3222

61x51x7x7 cm
HMI nr.: 77001
Varenr.: CLB2420



Stimulite® Classic Bariatric pude

Flad siddepude med støttende sider til høj vægt

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat balance, men selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er forstærket en smule, så puden kan modstå en brugervægt på op til 325 kg.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 325 kg
Vægt	3,5-4 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

35x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 38787

Varenr.: SM1416

46x51x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31351

Varenr.: SM1820

41x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31347

Varenr.: SM1616

51x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 53285

Varenr.: SM2018

41x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31348

Varenr.: SM1618

51x51x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31352

Varenr.: SM2020

41x56x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 101033

Varenr.: SM1620

46x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31349

Varenr.: SM1816

46x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 31350

Varenr.: SM1818



Stimulite® Slimline pude

Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 100 kg
Vægt	1,5 kg
Garanti	2 år

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskår

36x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51091 Varenr.: SMSX1416	46x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51095 Varenr.: SMSX1818
36x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51092 Varenr.: SMSX1418	46x51x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51096 Varenr.: SMSX1820
41x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51093 Varenr.: SMSX1616	51x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 69581 Varenr.: SMSX2016
41x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 49308 Varenr.: SMSX1618	51x46x3,6x7x6 cm HMI nr.: 51099 Varenr.: SMSX2018
41x51x3,8x7x6 cm HMI nr.: 69580 Varenr.: SMSX1620	51x51x3,6x7x6 cm HMI nr.: 51100 Varenr.: SMSX2020
46x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 51094 Varenr.: SMSX1816	



Stimulite® Slimline Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt top lag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 100 kg
Vægt	1,5 kg
Garanti	2 år



Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde

41x41x3 cm

HMI nr.: 42870

Varenr.: SI1616

46x46x3 cm

HMI nr.: 37132

Varenr.: SI1818

41x46x3 cm

HMI nr.: 40811

Varenr.: SI1618

46x51x3 cm

HMI nr.: 53284

Varenr.: SI1820

46x41x3 cm

HMI nr.: 86650

Varenr.: SI1816

51x51x3 cm

HMI nr.: 101001

Varenr.: SI2020



Stimulite® Silver pude

Trykaflastende siddepude

Stimulite Silver er en lav, flad trykaflastende pude til sofa eller hvilestol.

Materiale

Puden er fremstillet af 2-lags bikubestruktur. Bikubecellerne forhindrer fremadskridning og yder 100 % ventilation.

Anvendelse

Puden kan anvendes i f.eks. hvilestol, hvor der ønskes aflatsning og puden kan tilpasses alle stole. Kræver ingen justering og vedligeholdelse.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt Max 125 kg

Vægt 1,6 kg

Garanti 2 år



Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x6x6 cm HMI nr.: 38788 Varenr.: SP1416	46x46x6x6 cm HMI nr.: 31344 Varenr.: SP1818
41x41x6x6 cm HMI nr.: 31341 Varenr.: SP1616	46x51x6x6 cm HMI nr.: 31345 Varenr.: SP1820
41x46x6x6 cm HMI nr.: 31342 Varenr.: SP1618	51x46x6x6 cm HMI nr.: 101002 Varenr.: SP2018
46x41x6x6 cm HMI nr.: 31343 Varenr.: SP1816	51x51x6x6 cm HMI nr.: 31346 Varenr.: SP2020

Stimulite® Sport pude

Lav og flad siddepude til den aktive bruger

Puden anvendes til at forebygge tryksår hos brugere i lav- og medium risikogruppen.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er stødabsorberende, til den aktive bruger eller brugeren der dyrker kørestolsport.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 100 kg
Vægt	1,6 kg
Garanti	2 år



Tekniske data

Bredde x Dybde

36x36

HMI nr.: 64497
Varenr.: SOT1414

51x51

HMI nr.: 64505
Varenr.: SOT2020

41x41

HMI nr.: 64498
Varenr.: SOT1616

46x46

HMI nr.: 64504
Varenr.: SOT1818



Stimulite® On Top betræk

Øget siddekomfort

Stimulite® On Top Betræk forbedrer trykfordelingen og giver øget siddekomfort.

Materiale

Betrækket har indbygget en Stimulite® måtte og dermed opnås et unikt ventilationssystem. Tusindvis af huller i bikerberne tillader luften at cirkulere og bortleder fugt, så huden holdes sval og tør.

Anvendelse

On Top betrækket sættes på puden i kørestolen eller på arbejdsstolen. Pudsen opleves øjeblikkeligt luftig og åndbar, og toppen hjælper med at kontrollere varme og fugt. Betrækket er meget enkelt at sætte på og det kan passe alle puder.

Vaskeanvisning

Stimulite® On Top betrækket kan maskinvaskes ved max 40 grader.



Tekniske data

Bredde x Længde x Højde

38x27x3 cm

HMI nr.: 69022

Varenr.: WEDGE14101

41x27x3 cm

HMI nr.: 69033

Varenr.: WEDGE15101

38x27x5 cm

HMI nr.: 69031

Varenr.: WEDGE14102

41x27x5 cm

HMI nr.: 69034

Varenr.: WEDGE15102

Stimulite® positioneringskile

Justérbar


Stimulite® positionerings kile er fremstillet som en fast kerne af polyurethan. Den har bikubestruktur med mange huller, hvilket giver god ventilation.

Slidstærkt materiale i brugervenligt design

Betrækket er slidstærkt og åndbart cordura-materiale. Der er fastsyet velcrobånd, så kilen nemt kan fastgøres på kørestolspuden eller på kørestolen.

Kilen kan placeres på forskellige måder for bedre komfort

- Foran – for at mindske siddevinklen
- Bag – for at øge siddevinklen
- I siden – for at rette kropshældningen

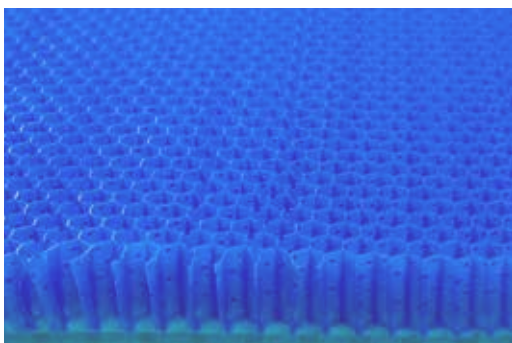

Tekniske data

Bredde x Dybde

41x31

HMI nr.: 69404

Varenr.: BACKR1612

51x51

HMI nr.: 69412

Varenr.: BACKR1816



Stimulite® Ryg

Indstillelig ryg til kørestole

Stimulite® bikubeplade fordeler trykket og giver god stabilitet, samtidig med at varme og fugt ledes bort.

Stropryggen giver mulighed for flere indstillinger i forhold til komfort og stabilitet.




Tekniske data

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72343
Varenr.: SBS1

60x60x2,50 cm
HMI nr.: 72345
Varenr.: SBS3

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72344
Varenr.: SBS2

60x60x3,10 cm
HMI nr.: 72346
Varenr.: SBS4

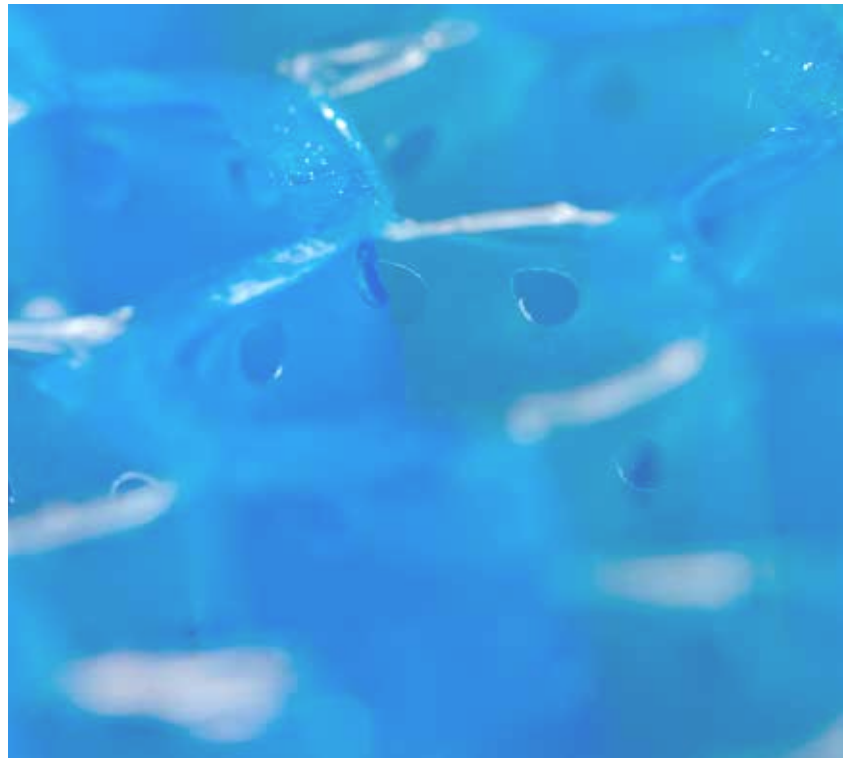

Stimulite® kvadrater

Trykaflastende materiale til mange formål

Stimulite® er udviklet med inspiration fra naturen, og er, ligesom bikuber, opbygget af sekskanter med skiftevis tykke og tynde tværvægge. Denne unikke opbygning giver en ensartet fordeling af belastningen og yder en ekstraordinær komfort.

Hvorfor Stimulite®?

Stimulite® bikuberne lindrer trykket ved at distribuere det væk fra udsatte områder. Resultatet af dette er, at benede fremspring "føler" det samme tryk som den omgivende anatomi.

Stimulite® bikuberne er perforerede så luften kan cirkulere og minimere dannelsen af varme og fugtighed fra kroppen. Fugten kan fordampe, hvilket bidrager til at holde huden intakt og holde kroppen på en stabil temperatur. Stimulite® flexer med kroppens bevægelse for at reducere glidetryk mod huden, og materialet genoptager med det samme sin oprindelige form efter brug.

Kvadraterne kan anvendes som aflastning i f.eks.

- Bade- og toiletstole
- Nakkestøtter
- Armlæn/Armstole
- Fodstøtter

Desuden kan Stimulite® anvendes til sansestimulering, f.eks.

- Sansebane
- Siddepude
- Trædeflise
- Træningsunderlag
- Bademåtte

Stimulite® fås i kvadrater, som skæres til efter mål.

Specialdesignet betræk

Det er muligt at bestille specialdesignede betræk til Stimulite®, eks. inkontinensbetræk til bade-, toilet- og bækkenstole eller til sportsaktiviteter.

Vaskeanvisning

Stimulite® kan maskinvaskes ved maks. 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Tåler kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 125 kg



Zibo Athene
...gør en forskel