




Zibo Athene

...gør en forskel

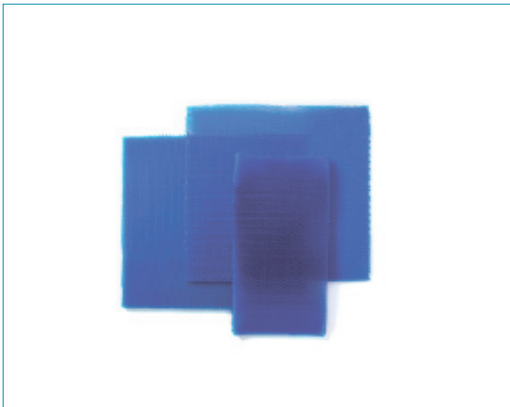


Tekniske data

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72343
Varenr.: SBS1

60x60x2,50 cm
HMI nr.: 72345
Varenr.: SBS3

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72344
Varenr.: SBS2

60x60x3,10 cm
HMI nr.: 72346
Varenr.: SBS4

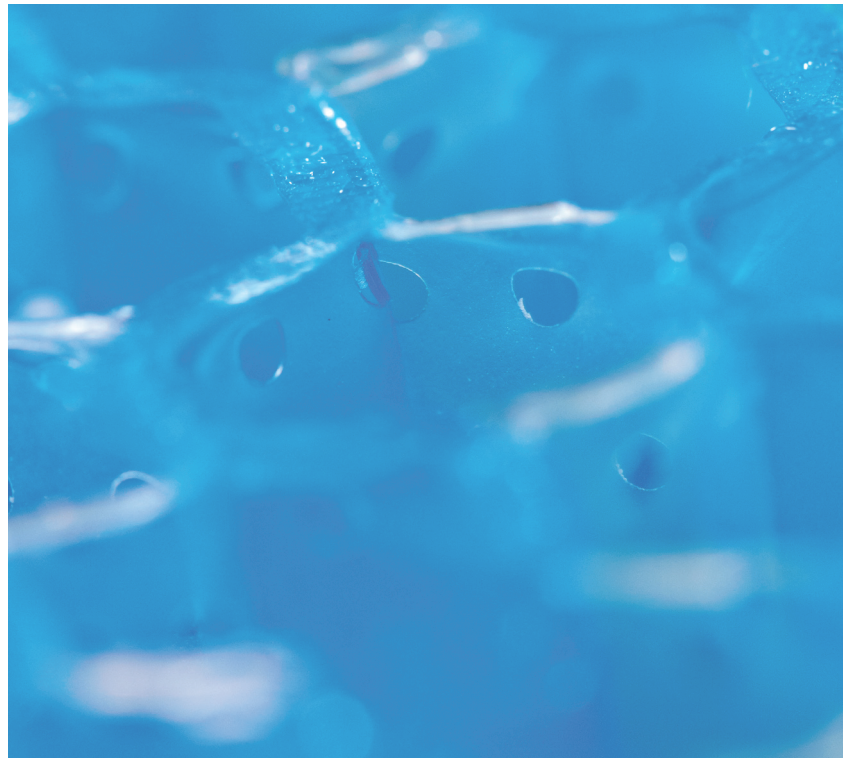

Stimulite® kvadrater

Trykaflastende materiale til mange formål

Stimulite® er udviklet med inspiration fra naturen, og er, ligesom bikuber, opbygget af sekskanter med skiftevis tykke og tynde tværvægge. Denne unikke opbygning giver en ensartet fordeling af belastningen og yder en ekstraordinær komfort.

Hvorfor Stimulite®?

Stimulite® bikuberne lindrer trykket ved at distribuere det væk fra udsatte områder. Resultatet af dette er, at benede fremspring "føler" det samme tryk som den omgivende anatomi.

Stimulite® bikuberne er perforerede så luften kan cirkulere og minimere dannelsen af varme og fugtighed fra kroppen. Fugten kan fordampe, hvilket bidrager til at holde huden intakt og holde kroppen på en stabil temperatur. Stimulite® flexer med kroppens bevægelse for at reducere glidetryk mod huden, og materialet genoptager med det samme sin oprindelige form efter brug.

Kvadraterne kan anvendes som aflastning i f.eks.

- Bade- og toiletstole
- Nakkestøtter
- Armlæn/Armstole
- Fodstøtter

Desuden kan Stimulite® anvendes til sansestimulering, f.eks.

- Sansebane
- Siddepude
- Trædeflise
- Træningsunderlag
- Bademåtte

Stimulite® fås i kvadrater, som skæres til efter mål.

Specialdesignet betræk

Det er muligt at bestille specialdesignede betræk til Stimulite®, eks. inkontinensbetræk til bade-, toilet- og bækkenstole eller til sportsaktiviteter.

Vaskeanvisning

Stimulite® kan maskinvaskes ved maks. 60 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Tåler kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 125 kg